

U-Cool

ផ្នែកទី១ ពិពណ៌នាផលិតផល

១.១ ពិពណ៌នាផលិតផល

១.១.១ ការកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពពីចម្ងាយ

ឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅវាស់សីតុណ្ហភាព កត់ត្រា និងរក្សាទុកទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពដែលបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ជូនទៅវេទិកា តាមរយៈ GPRS សម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពពីចម្ងាយ។






១.១.២

ផ្នែកទី២ ការណែនាំផលិតផល

២.១ ការបង្ហាញផលិតផល

២.៣ ការសាកថ្ម

ឧបករណ៍នេះប្រើថ្ម លីចូមប៊ូលីម៉ែ អាចសាកបាន និង អាំងឌីកាទ័រមាន ៣កាំ ។ ពេលអាំងឌីកាទ័រ ថ្មអស់  ថាមពលនៅតិចជាង ២០% ពន្លឺក្រហមញាក់ រាល់៥វិនាទីម្តង ហើយ វេទិកាផ្ញើសារ នៃសញ្ញាខ្សោយថ្ម បង្ហាញថាវាត្រូវការបញ្ចូលថ្ម។

មុនប្រើ៖ ពិនិត្យស្ថានភាពថ្មនៃឧបករណ៍ ។ ពេលអាំងឌីកាទ័រថ្មអស់  អ្នកត្រូវបញ្ចូលវា។ ការបញ្ចូលថ្មធ្វើដូចតទៅនេះ៖

១/ ដកគម្របUSB ដែលនៅពីលើឧបករណ៍ឡើង


២/ ភ្ជាប់ដុំសាកទៅឧបករណ៍។ ពេលកំពុងសាក អាំងឌីកាទ័រភ្លើង (ពន្លឺបីពណ៌)បង្ហាញ ក្រហម និងខៀវ ព្រមពេលជាមួយគ្នា។


៣/ ពេលថ្មពេញ ពន្លឺក្រហមរលត់ និងពន្លឺខៀវភ្លឺជានិច្ច។


សំគាល់៖ សូមប្រើដុំសាកដែលផ្តល់ឲ្យជាមួយឧបករណ៍។

២.៤ ការបើក/បិទ


២.៤.១ ការបើក

១.ចុកប៊ូតុង  ៤ វិនាទី អាំងឌីកាទ័របញ្ចេញពន្លឺបៃតងម្តង អេក្រង់បង្ហាញវាដំណើរការ។


២.ចុកប៊ូតុង  ៤ វិនាទី អាំងឌីកាទ័របញ្ចេញពន្លឺក្រហមម្តង ហើយអេក្រង់មិនបង្ហាញអ្វី បញ្ជាក់ថាខ្សោយថ្ម មិនអាចដំណើរការបាន សូមបញ្ចូលថ្ម។


សម្គាល់: ពេលឧបករណ៍ដំណើរការឡើងវិញ ចុកប៊ូតុង  ដើម្បីចូល engineering mode និង អានវគ្គ ២.៩ សម្រាប់ធ្វើបន្ត

### ២.៤.២ ការបិទ

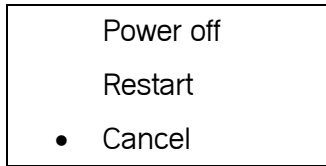

ដំណើរការបិទមានដូចតទៅ:

១/ ចុកប៊ូតុងណាមួយ បន្ទាប់ពីអេក្រង់បើក ចុកប៊ូតុង  ៤ វិនាទី អេក្រង់បង្ហាញ "Power off", "Restart" និង "Cancel" ។ សញ្ញា "\*" ចង្អុលទៅពាក្យ "Cancel"។

២/ ចុកមេនុយប៊ូតុង  ដើម្បីប្តូរការជ្រើសរើសរហូតដល់សញ្ញា "\*" ចង្អុលពាក្យ "Power off"

៣/ ចុកប៊ូតុង  ដើម្បីបញ្ជាក់

៤/ ការបិទមិនប៉ះពាល់ទិន្នន័យដែលបានទុកទេ។

### ២.៥ ការបើកអេក្រង់

#### ២.១០ សីតុណ្ហភាព កំណត់ត្រា

ទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រា បានថតទុកក្នុងឧបករណ៍ជា ទំរង់PDF

វិធីបញ្ចេញទិន្នន័យសីតុណ្ហភាព

ក/ បើកឧបករណ៍នេះ

ខ/ ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅកំពូទ័រ ជាមួយ ខ្សែUSB របស់វា។ រងចាំរហូត "Removable Disk" បង្ហាញក្នុង File manager ហើយ "PDF Loading" បង្ហាញលើឧបករណ៍។ បើទិន្នន័យច្រើន លទ្ធផលបញ្ចេញមកមានរយៈពេលយូរ។ កំពូទ័រអាចផុតម៉ោង ហើយបង្ហាញ "unrecognizable device"។ បន្ទាប់ពី "PDF Loading" បាត់ ដោត USB ម្តងទៀត។

គ/ បើក "Removable Disk" និងរក file PDF ដែលទាក់ទង ពេលត្រឹមត្រូវ។ បើក និងថតចម្លង file តាមតម្រូវការ។

ឃ/ ឧបករណ៍អាចបញ្ចេញ PDF file ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ (ពេលលប់ PDF file វាអាចយកចេញម្តងទៀត)

ង/ ៧៦៨០ នៃទិន្នន័យអាចយកចេញសរុប និងទិន្នន័យ៣២ថ្ងៃចុងក្រោយអាចយកចេញបើកតម្រាងនាទីម្តង។

Haier Biomedical   **Data query**   Statistics and Report   Organization management   Log management   English   MEDICOM

### Equipment query + equipment

department:    device name:    Device or collector code:    Device status:

department	device name	Collector	data	Status	Update time	view
MEDICOM	60004011	60004011 - Point1 60004011 - Point2	32.3°C/60%RH 2.9°C	Normal	2021-06-29 11:50:00 2021-06-29 11:50:00	<a href="#">data</a>   <a href="#">Configuration</a>